

Pneumothorax sug




Pleurapumpen är utvecklad för att diagnostisera, övervaka, samt behandla pneumothorax.

**Tekniska data:**

Patient läckage	0.01ml/min - 550ml/min
Vacuum reglerin	5-40 cm/Vp
Max flöde	3.8 lit/min
Vattentålighet	IP 21
Mått	L160 B140 H290 mm
Vikt	1,3 Kg

Kretskort

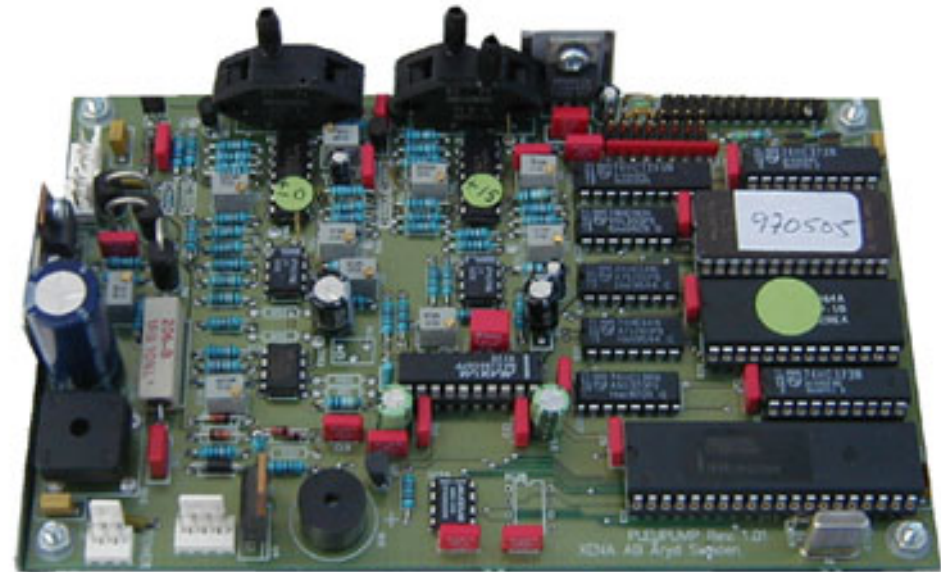

Pleurapumpens styrelektronik består av analog och en mickrobaserad digitadel.

Analogdelen har tryckgivare för att kontrollera och övervaka undertrycket i patientens pleurahåla.

En 4 radig 20 tecken display visar Patientvacuum, läckage i lungan, evakuerad totalvolym, larmgränser, samt batteri status.

[För att återgå till hemsidan stäng detta fönster](#)