

VEKTORIELL EKG TYP MIDA




Vektoriell EKG typ MIDA.

Vektoriell EKG apparat för intensivvård.

Xena Medical har utvecklat schassi, front, samt power supplies.

Övrig konstruktion är utförd av Ortivus Medical som äger produkten.

Xena har även producerat kompletta utrustningar till Ortivus Medical

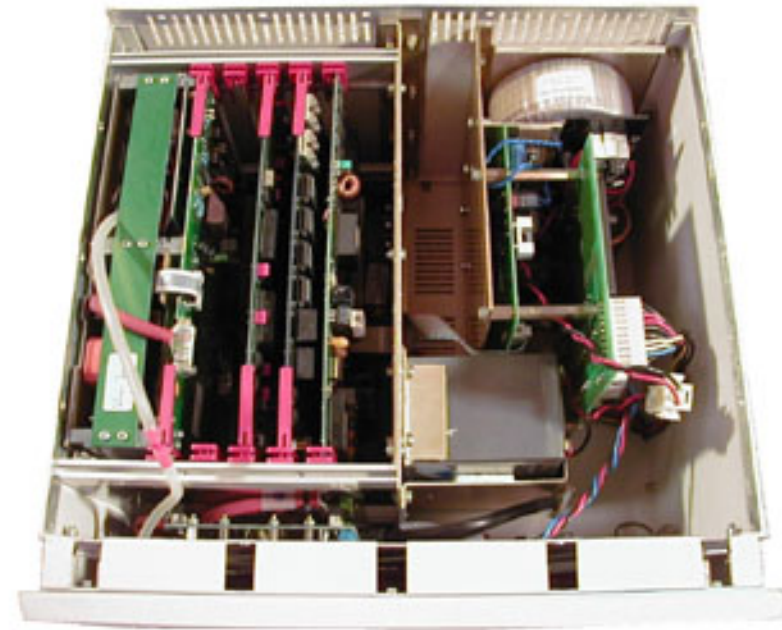

EKG apparat med demonterad kåpa

Utrustningen är moduluppbyggd. Vilket medför att power supplies sitter monterat på högra bakstycket, komplett front med display sitter skruvad i framstycket.

samtliga kretskort sitter i en kassett med 5 St. 96-poliga kontaktdon.

Konstruktionen medför ett förenklat underhåll samt enklare produktion.

Varje modul produceras och testas var för sig, före slutmontering.

Efter slutmontering testas utrustningen komplett med samtliga ingående moduler.

[För att återgå till hemsidan stäng detta fönster](#)